


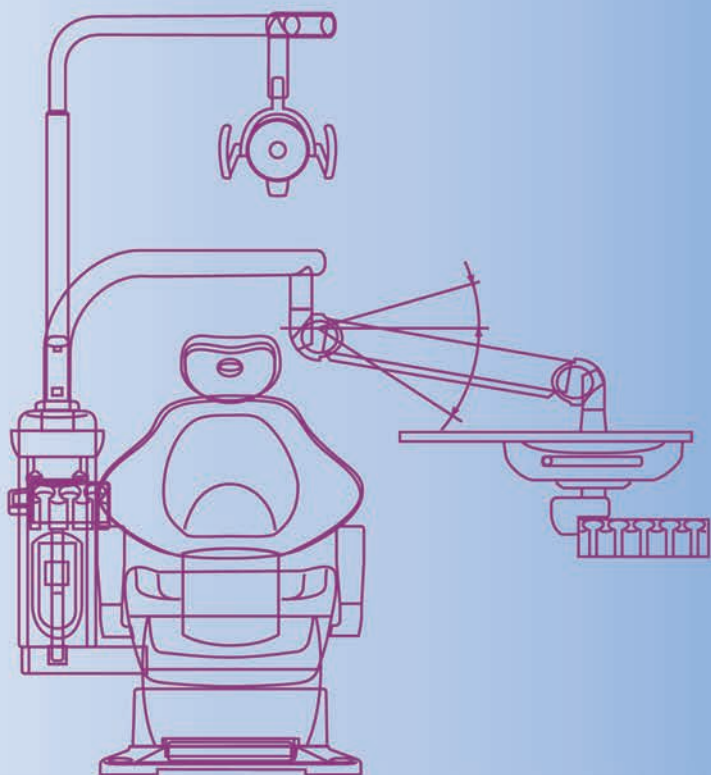


new generation


CLESTA II

Dental System

 **Belmont**

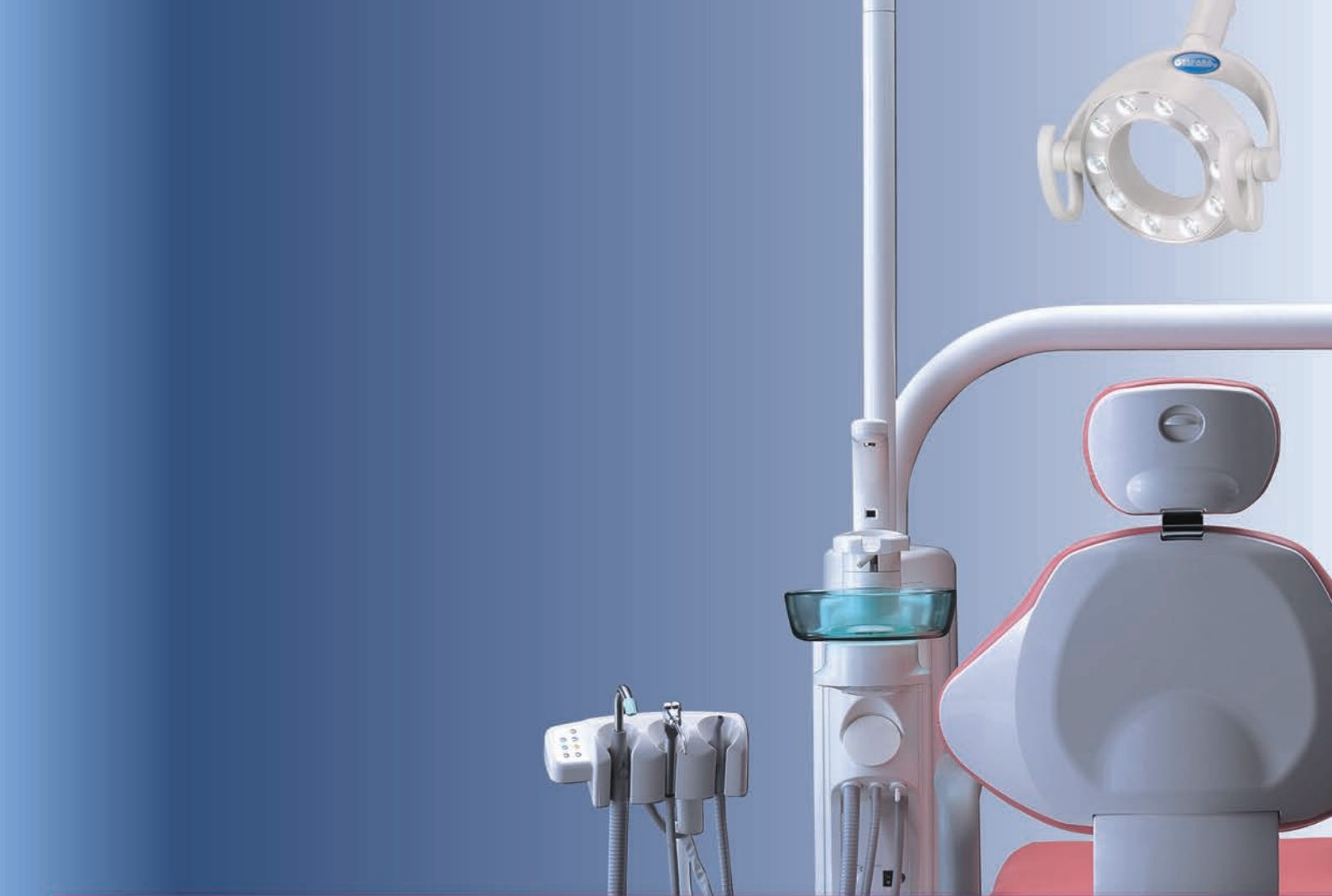

Belmont setzt die CLESTA - Erfolgsstory mit einer

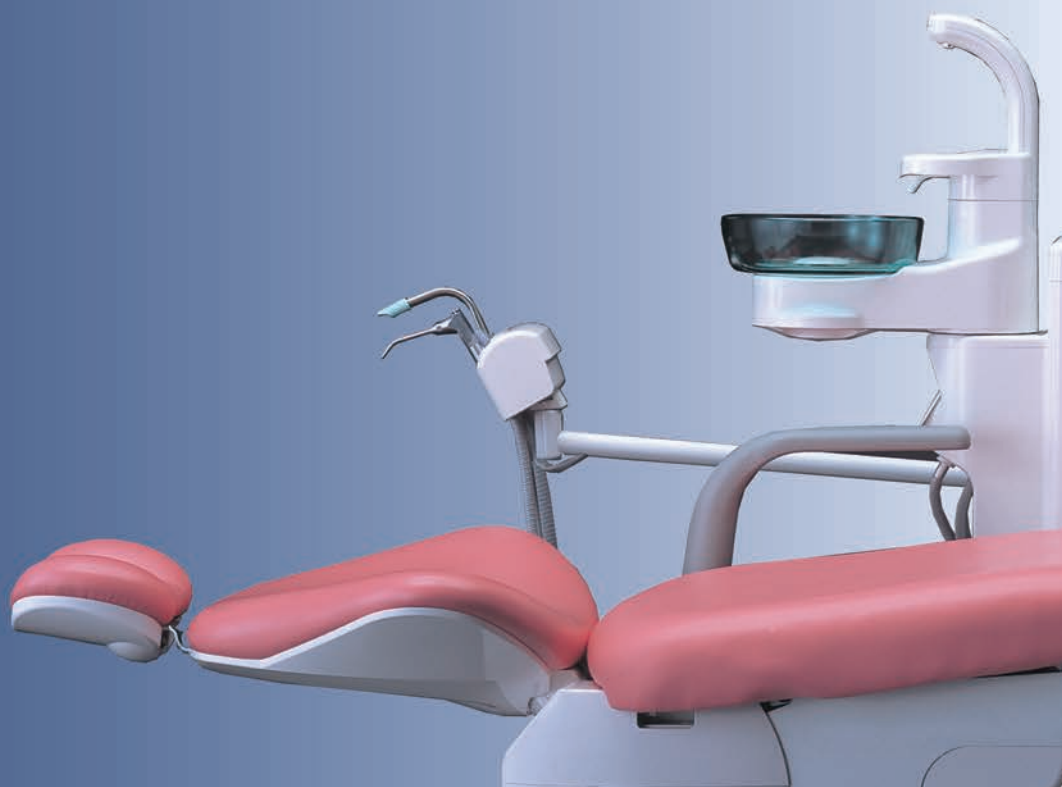

CLESTA II



völlig neuen Generation von Dental Systemen fort.



1. Einstellbare Stuhlpositionen

Die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten des Stuhles ermöglichen optimale Behandlungspositionen für alle beteiligten Personen.

3. Die Place Type Instrumenteablage (optional)

ermöglicht ergonomisches Greifen und blindes Ablegen der Instrumente.

4. Die Sensorsteuerung für den Mundglasfüller (optional)

füllt das Mundglas automatisch über eine pneumatische Zeitsteuerung.

6. Arzttisch mit integriertem Traytablett

Der große Arzttisch kombiniert die Köcherleiste für 5 Instrumente (Typ Holder) mit dem „ first priority system “ und dem Ablagetray. Der große Schwenkbereich des Tisches ermöglicht sowohl vertikal , als auch horizontal eine optimale Anpassung an alle Behandlungspositionen.

2. Axis Rückenlehne

Der kombinierte Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne (Axis) sorgt für einen ausgezeichneten Patientenkomfort. Die ultradünne Rückenlehne gewährleistet maximale Beinfreiheit für Behandler und HelferIn.

5. Das Spülsystem mit Fkush Out Tray (optional)

ermöglicht eine einfache Reinigung der Wasserleitungen an allen Handstücken. Wasserlauf ist programmierbar.

Belmont - Qualität, die Sie fühlen können

7. Stuhlmontierte Speifontäne

Die am Stuhl adaptierte Speifontäne mit ihrem im hohem Maße haltbaren und unzerbrechlichen Kunststoffgehäuse vermittelt dem Patienten ein sauberes, hygienisches Umfeld. Die gerundeten, glatten Oberflächen sind problemlos zu reinigen.

9. Bedienungskonsole für die Assistenz mit Höhenverstellung (optional)

Die Instrumentenablage ist für jeweils einen kleinen und großen Saugschlauch und für eine Mehrfunktionsspritze vorgesehen. Mit dem Bedienpaneel werden die Stuhlprogramme, Speischalenspülung und Mundglasfüllung gesteuert.

11. Service Paneel

Das zusätzliche Service Paneel steuert die Funktionsspritze, die Erwärmung des Mundglaswassers und eine Wasserversorgung für externe Geräte.

8. Attraktive Glasschale

Die abnehmbare Glasschale ist sehr haltbar und äußerst leicht zu reinigen. Wählen Sie unter den Farben blau (= standard), transparent, rosa oder grün, um einen neuen Farbakzent in Ihrer Praxis zu setzen. Auch in Keramik lieferbar.



10. Großer Filter

Der von außen zugängliche, äußerst stabile Filter mit abnehmbarer Kappe ist leicht und schnell zu reinigen.

12. OP – Leuchte, Serie 701

Die schlanke, hervorragend ausbalancierte OP – Leuchte erzeugt ein perfekt ausgeleuchtetes Lichtband und bietet mit der Composite Schaltung dem Behandler noch mehr Sicherheit bei der Verarbeitung lichterhärtender Materialien. Der Sensor ermöglicht das berührungslose Ein / Ausschalten, ein 2 - Stufenschalter stellt 28.000 oder 18.000 Lux zur Wahl. (Composite Schaltung : 8.000 Lux). Der Patientenspiegel ist als Option erhältlich.

1	2	
3	4	5
6		7
8		9
10	11	12

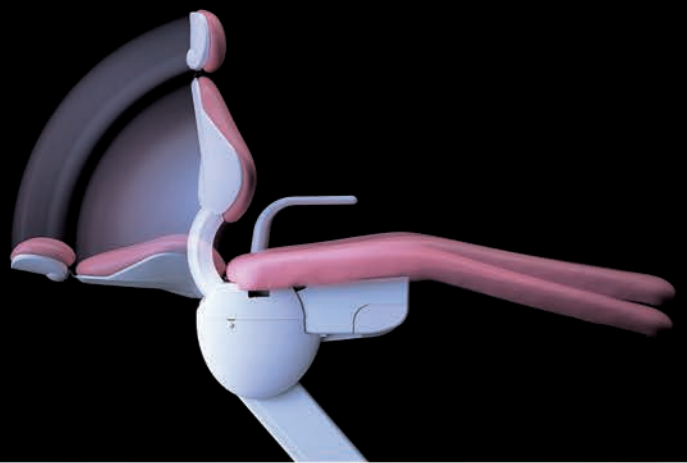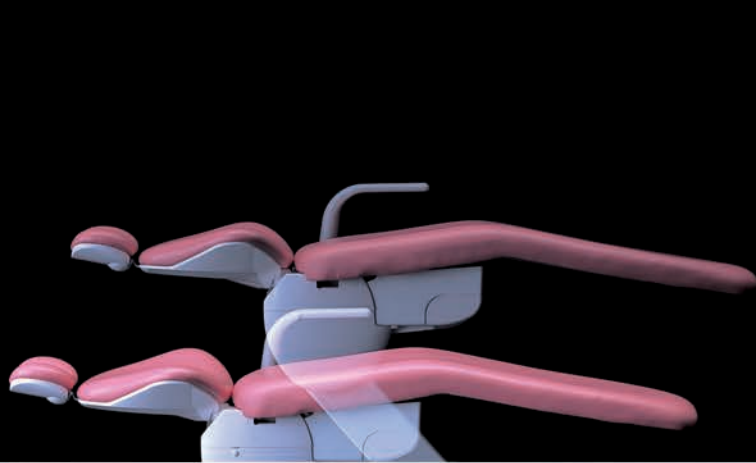

optionale Ausstattungen

1. Panorama Röntgenfilmbetrachter
ideal für ein Beratungsgespräch vor der
Behandlung. Dieser Niederspannung-
Betrachter erzeugt eine sehr helle Leuchtfläche.

3. Kombiniertes Fußschalter*
optimiert die Steuerung der Unit und des
Patientenstuhles kompakt mit nur einem Schalter.

5. OP – Leuchte Serie 900 mit LED Licht
mit einer Hochleistungs-LED, mit einer stufenlosen
Helligkeitsregulierung von 4.000 - 32.000 lx,
permanenter Farbtemperatur von 5.000° Kelvin,
mit Composite Modus, berührungsloser
Sensorschaltung.

7. Zweigelenk – Kopfstütze*
leicht justierbar für optimale Patienten
Positionierung, im Besonderen auch für
die Kinderbehandlung.

9. Zentrales Bedienpaneel E – Type*
(für die Elektroausführung)
enthält eine große, leicht ablesbare
Digitalanzeige und zusätzliche Funktionen
zur Steuerung der Mikromotore.

2. Monitorhalter
für die integrierte Anbringung eines LCD -
Flachbildschirmes, bei weitestgehend
verdeckter Kabelführung.

4. Clean water system
eine unabhängige, mit Druckluft beaufschlagte
Wasserversorgung.

6. Arzttisch ohne zusätzliche Ablage
ist auch in der kleineren Ausführung lieferbar

8. Schwenkbare Speischale*
um 90° sehr leicht schwenkbar, bietet sie Ihren
Patienten maximale Sicherheit und Komfort
beim Mundspülen.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*in Grundausstattung enthalten


Belmont - Spitzentechnologie, der Sie vertrauen können

Belmont hat die innovative Technologie mit seinen traditionellen Werten für zahnärztliche Behandlungsplätze kombiniert. Das bietet Ihnen anspruchsvolle, hochentwickelte Qualität, Flexibilität und vor allem unübertroffene Sicherheit.

Die CLESTA II überzeugt von Belmont`s Verständnis für Innovation, Design, Behandlungskomfort und für außerordentliche Beständigkeit. Technologischer Vorsprung und ausgereifte Technik repräsentieren eine neue Generation von Belmont Dental Systemen.

new generation
CLESTA II
Dental System




Modell Holder

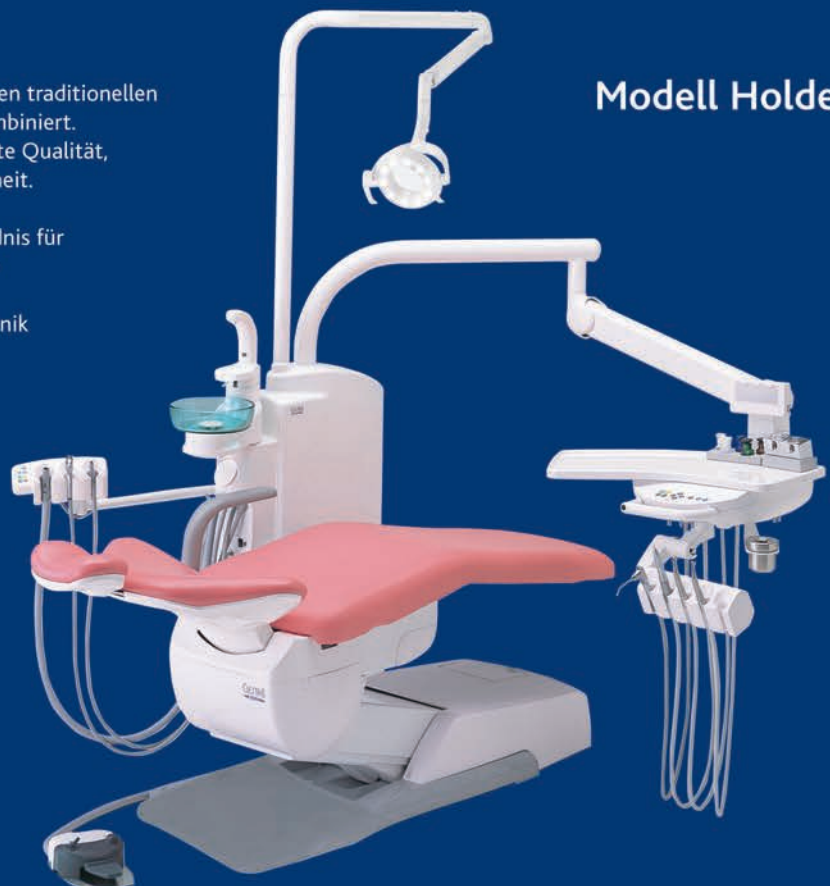



Technische Daten Modell Holder

Patientenstuhl, Gewicht netto : 115 kg
 Unit , Gewicht netto : ca. 80 kg
 (nach Ausstattung, ohne Leuchte)
 Sitzhöhe min : 410 mm max: 790 mm

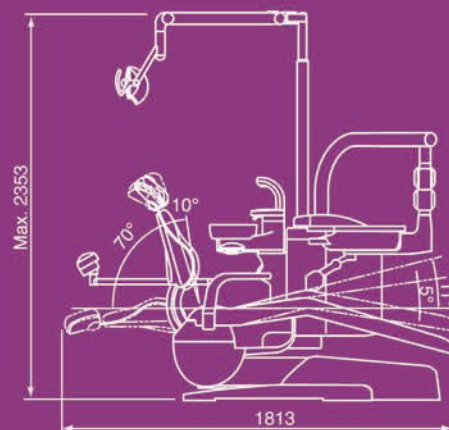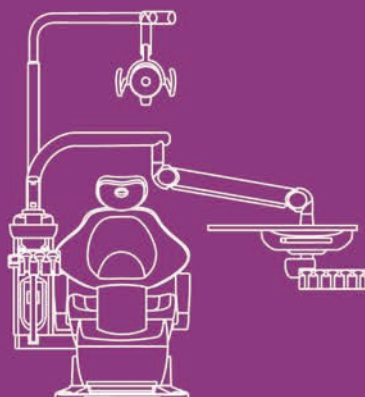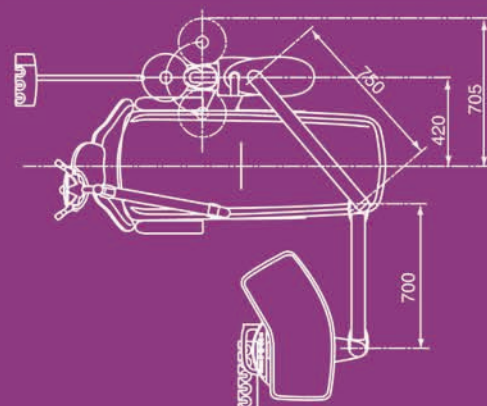

Schwingbügel

Der Arzttisch kann nahe an die Mundhöhle des Patienten herangefahren werden. Die Instrumente sind schnell und ergonomisch zu greifen, die Schwingarme federleicht zu führen. Die langen Instrumentenschläuche erweitern die Möglichkeiten individueller Behandlungsmethoden.



Für Linkshänder lassen sich Steuergerät und Handgriff an die linke Seite des Arzttisches setzen. (Optional)



Steuergerät mit Display für CLESTA II Elektroausführungen (Elektromotore)

Cart

Das Fahrstativ ist aus solidem Stahl gefertigt und leicht beweglich. Mit dem stufenlos höhenverstellbaren Arzttisch gewährleistet das Cart ein Höchstmaß an Flexibilität und individueller Behandlungsfreiheit





Optional auch mit kleinem Arzttisch lieferbar.






Maßangaben in mm



Schwingbügel

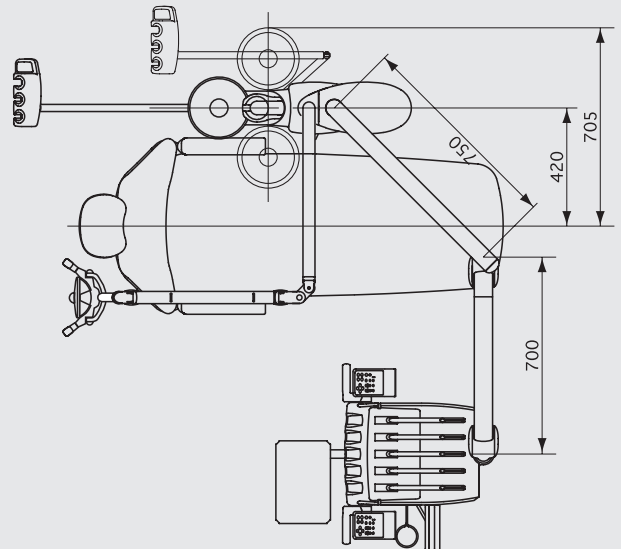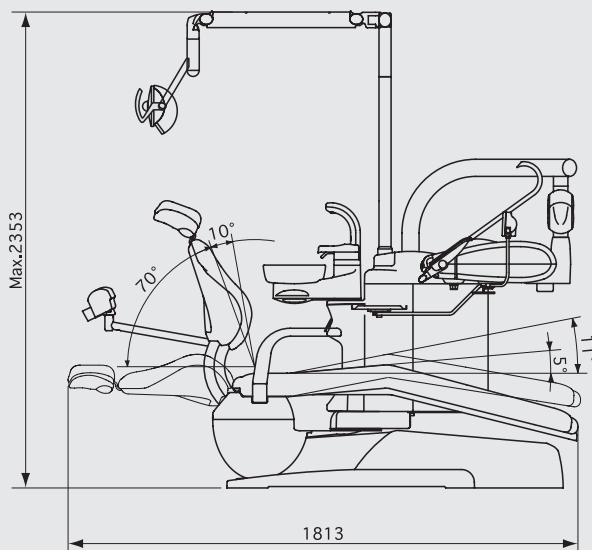

Cart (mit großem Tisch)

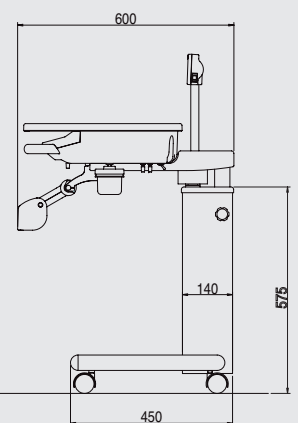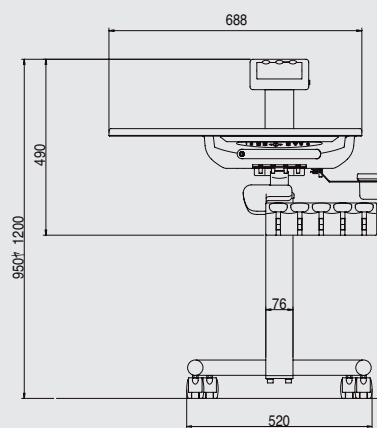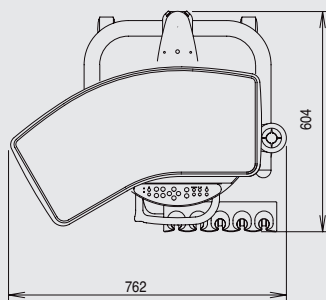

Cart (mit kleinem Tisch) - optional -

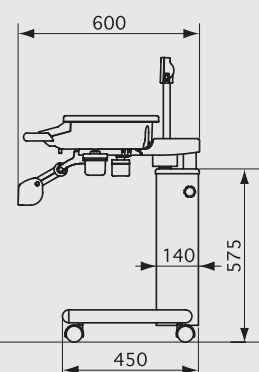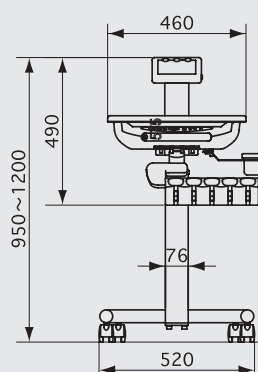

Bodenmontierte Clesta II

mit neuem Patientenstuhl „CLAIR“



Modell Holder
mit großem Arzttisch



Die neu gestaltete und auf dem Boden montierte Speifontäne benötigt keinen separaten Anschlusskasten, dies macht einen aufgeräumten Eindruck und ermöglicht eine leichte Reinigung.

Modell Schwingbügel
mit ergonomisch optimaler Instrumentenführung



Fünf federleichte Schwingbügel sind die Garantie für ein ermüdungsfreies Behandeln

CLAIR Patientenstuhl

Der neue Knickstuhl mit ausfahrbarer Beinauflage;
auch als Einzelstuhl lieferbar



Zweigelenk-Kopfstütze
(optional)



Der ergonomische AXIS Bewegungs-
ablauf der Rückenlehne ist perfekt
den natürlichen Körperbewegungen
des Patienten nachempfunden und
gewährleistet ein Höchstmaß an
Komfort.



Die AXIS Hydraulik-Kopfstütze
arretiert sanft und lagert den Kopf
des Patienten für eine optimale Sicht
auf die Mundhöhle

Die neue auf dem Boden montierte CLESTA II zusammen mit dem neuen Knickstuhl CLAIR entsprechen unserem Anspruch für exzellente Produkte und unserem Ziel, den neuen Anforderungen aus den Zahnarztpraxen neue Lösungen entgegenzusetzen.

Die CLESTA II Standsäule bieten wir in den Versionen Holder mit Tragarm über dem Patienten, Cart und Schwingbügel (Rod) an. Für die Ablage der Instrumente kann zwischen Holder mit 5-fach Köcher und Place Type gewählt werden. Diese Units enthalten alle CLESTA II Ausbausätze und erlauben dem Zahnarzt die Auswahl von vielen technischen Optionen.

Diese neue Einheit mit dem neuen Patientenstuhl bietet eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Somit findet jeder Zahnarzt nach seiner individuellen Behandlungsmethode das richtige Gerätekonzept. Die große Auswahl macht es möglich, sowohl die Leistungsfähigkeit des Behandlers zu steigern, als auch den Wert der Praxis zu erhöhen.

Nahtlose Polster mit
Soft-Touch und sanfte,
leise Bewegungsabläufe
lassen keinen Stress
aufkommen.

CLAIR Patientenstuhl
Sitzhöhe 500 - 765 mm



Die Joystick-Fußschalter
ermöglichen es dem
Zahnarzt, den Patienten
schnell in die richtige
Lage zu bringen. Die
Hände bleiben frei und
hygienisch sauber.



Die Komfort-Rückenlehne
ermöglicht eine optimale
Positionierung des
Patienten.



Die abklappbare Armlehne
gibt besonders älteren
Patienten noch mehr Halt
und Sicherheit. Bei
geöffneter Armlehne
können auch Rollstuhl-
Patienten mühelos
ein- und aussteigen.



BELMONT
TAKARA COMPANY EUROPE GMBH

Berner Straße 18
60437 Frankfurt am Main

Tel. 0049 (0) 69 – 50 68 78 0
Fax. 0049 (0) 69 – 50 68 78 20
dental@takara-belmont.de

www.takara-belmont.de



Belmont

